



info@oxigeno-peru.com



01-6449026



Concentrador de oxígeno portátil

INOGEN ONE G3



MADE IN USA



info@oxigeno-peru.com



01-6449026

¡UNA SOLA SOLUCIÓN PARA TODO!

Los pacientes que necesiten un suplemento de oxígeno utilizan el concentrador de oxígeno **Inogen One® G3** por orden médica. El equipo suministra una concentración elevada de oxígeno (alta calidad 94% de pureza) y se emplea con una cánula nasal que transfiere el oxígeno desde el concentrador al paciente.




INOGEN ONE®
Oxygen
Anytime. Anywhere.



info@oxigeno-peru.com



01-6449026

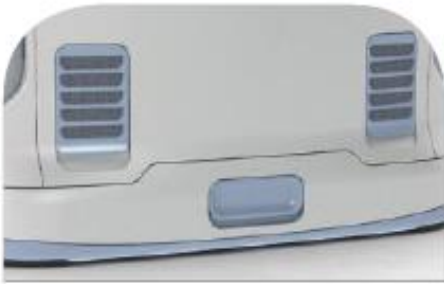

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

El Inogen One® G3 puede utilizarse en el hogar, instituciones, vehículos, aviones y diversos entornos móviles.

Además los equipos Inogen son los más silenciosos y confortables del mercado y sus resultados clínicos en los pacientes son excelentes.

- 2,2 kilos (4,8 libras), con batería sencilla.
- Ajustes de flujo de 1 a 5.
- Tan compacto y ligero que se puede llevar colgado del hombro.



info@oxigeno-peru.com



01-6449026

Funcionamiento a Pulsos:

El Inogen One® G3 cuenta con el sensor de inspiración más sensible del mercado, el cuál realiza la entrega de oxígeno solo cuando detecta una inspiración por parte del paciente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso	2.19 kg. (4.8 lbs.) (incluye batería individual)
Tamaño	Largo: 22,2 cm. (8.75 in.) Ancho: 7,6 cm. (3.0 in.) Altura: 21 cm. (8.25 in.) (incluye batería individual)
Flujo oxígeno	Sistema de administración de dosis de pulso Cinco configuraciones de flujo 1, 2, 3, 4, 5
Power	Fuente de alimentación de CA 100-240 V, 50-60 Hz (detección automática para permitir su uso en todo el mundo) Cable de alimentación de CC: para uso móvil en automóviles
Batería	Duración (batería individual): hasta 4.7 horas Recargue aproximadamente de 2 a 4 horas con alimentación de CA o CC Duración (batería doble): hasta 10 horas Recargue aproximadamente de 4 a 8 horas con alimentación de CA o CC
Nivel ruido	39 dBA*
Operación	Funciones de control simples y pantalla LCD fácil de leer.
Uso	Diseñado para uso de 24/7


*En el ajuste de flujo 2



info@oxigeno-peru.com



01-6449026

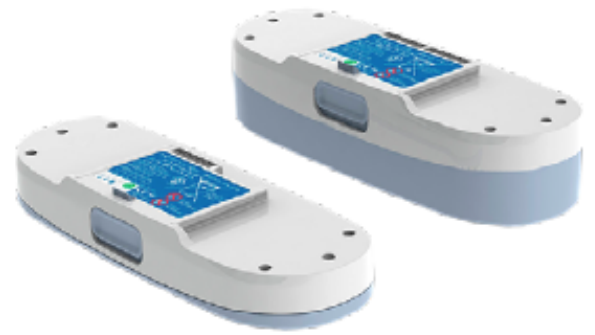

AJUSTES DE FLUJO:

AJUSTE DE FLUJO	TASA DE FLUJO	10 BPM ML/BOLO	20 BPM ML/BOLO	25 BPM ML/BOLO
1	210 ML/MIN	21	11	8
2	420 ML/MIN	42	21	17
3	630 ML/MIN	63	32	25
4	840 ML/MIN	84	42	34
5	1050 ML/MIN	105	52,5	42

BPM= Beats Per Minute / Pulsos Por Minuto

DURACIÓN DE LA BATERÍA:

FLUJO	BATERÍA SIMPLE	BATERÍA DOBLE
1	4,5 hr	9,0 hr
2	4,0 hr	8,0 hr
3	3,0 hr	6,0 hr
4	2,0 hr	4,0 hr
5	1,5 hr	3,0 hr

Tiempo estimado en baterías nuevas y cargadas al 100%. La vida de la batería puede cambiar en el tiempo y en la frecuencia respiratoria. Si las baterías no duran lo mismo que cuando fueron compradas, lo más probable es que necesiten ser reemplazadas. *El equipo incluye 1 Batería Simple. Preguntar disponibilidad de stock para más baterías.*



info@oxigeno-peru.com



01-6449026

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

Accesorios Incluidos



CARGADOR CA
*



CARGADOR AUTO
*



BOLSO TRANSPORTE
*



CÁNULA
*



FILTRO EXTERNO
*

Batería a Elección Incluida:

- 1.) Bateria Simple (x1).
- 2.) Bateria Doble (x1).
- 3.) 1 Bateria Simple + 1 Bateria Doble.

**Precio varia según la elección de batería.
Opción 1, 2 o 3. Consultar disponibilidad**



BATERÍA SIMPLE
**



BATERÍA DOBLE
**

Accesorio Opcional (NO INCLUIDO)



CARGADOR EXTERNO



MOCHILA TRANSPORTE



info@oxigeno-peru.com



01-6449026



**FAA
CERTIFIED**

Inogen® cuenta con **certificación FAA** (*Administración de Aviación Federal*), lo que permite su utilización a bordo de las principales líneas aéreas.





info@oxigeno-peru.com



01-6449026